


## Kort användarinformation för VISIOFOCUS<sup>®</sup> Pro 06480

Använd Visiofocus<sup>®</sup> PRO i ett dragfritt rum med jämn temperatur mellan 16 och 40°C. Om termometern kommer från ett rum som har en omgivande temperatur som skiljer sig från det rum där du mäter temperatur måste termometern kalibreras manuellt alternativt vänta minst 5 minuter för att temperaturen kalibreras med den automatiska kalibreringsfunktionen. **Varför?** Termometern mäter hudtemperaturen i pannan och använder rumstemperaturen till att beräkna *core* temperaturen. Temperaturen som visas på skärmen är *core*, *rektal*, *mun* eller *armhåletemperaturen*.

Mätning på olika platser på pannan ger olika resultat. Mät därför alltid på samma plats **i mitten av pannan**. Halvvägs mellan toppen av näsan och hårfästet. Håll termometern vinkelrätt mot pannan. För att få riktigt avstånd se bilden nedanför.




**Mät inte temperatur på en svettig panna eftersom den uppmätta temperaturen inte kan garanteras.** Det är inte alltid tillräckligt att torka pannan innan en mätning. Ett alternativ är att mäta på ett slutet ögonlock. Detta ger inte en exakt mätning men kan betraktas som en giltig approximation av en kroppstemperatur.

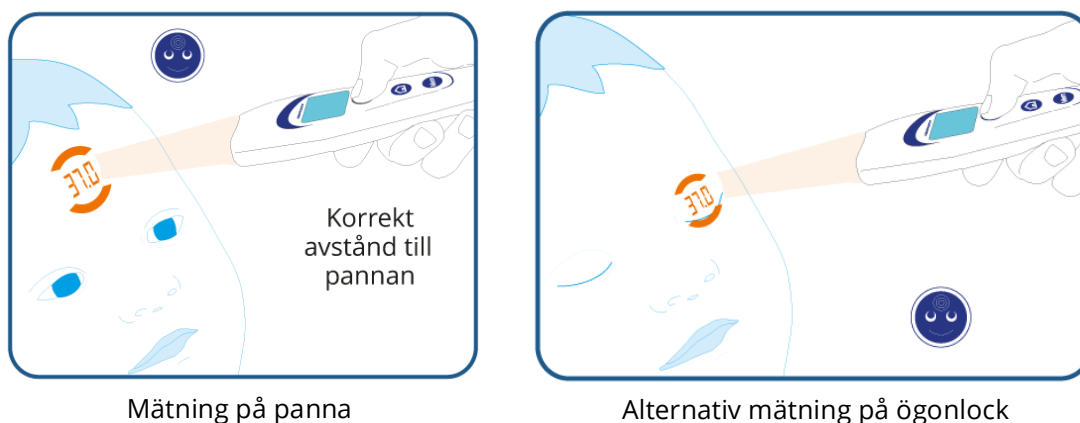


## Instruktion för hur du börjar använda Visiofocus® PRO

### Starta termometern


» Öppna det blåa locket och tryck på valfri knapp för att starta termometern

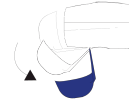





### Genomförande av temperaturmätning

- » Håll in ansiktsknappen  samtidigt som du håller termometern vinkelrätt mot mitten av patientens panna
- » Justera avståndet tills att siffrorna är mellan bågar. Läs av temperaturen direkt på pannan
- » Om knappen släpps går det läsa av temperaturen i displayen

### Ytmätning

- » Tryck på husknappen  samtidigt som du håller termometern vinkelrätt mot den yta du önskar mäta temperatur på. Du kan bl.a. mäta temperatur på vägg, badvatten, rumstemperatur m.m.
- » Justera avståndet tills att siffrorna är mellan bågar. Läs av temperaturen på ytan du mäter
- » Om knappen släpps går det läsa av temperaturen i displayen




### Minnesfunktion

Minnesfunktionen lagrar de 9 sista mätningarna. För att aktivera funktionen, tryck på MEM-knappen  två gånger. Skärmen övergår till lila färg och den sista mätningen kommer att visas med talet 1 och symbolen  eller  beroende på vilken mätning som genomförts. Tryck vidare på  och du får upp övriga temperaturmätningar som lagrats i minnet.

### Kalibrering av Visiofocus® PRO till aktuell rumstemperatur

Termometern kalibrerar sig till rumstemperatur automatiskt (*i Doc mode*) när den registrerar stor temperaturavvikelse. Det visas med en nedräkning om 4 minuter på skärmen. Vänta tills att nedräkningen är färdig innan du använder termometern. Om termometern har varit i bruk över en längre tid är det rekommenderat att lägga den åt sidan så att den kalibreras.

Det går att kalibrera termometern manuellt till aktuell rumstemperatur om termometern används i olika miljöer där temperatur varierar. För att kalibrera manuellt, följ fyra enkla steg:

- » Öppna det blåa locket på termometern
- » Tryck samtidigt på -knappen och -knappen (CAL visas i displayen)
- » Håll -knappen inne medan du fokuserar siffrorna mellan bågar
- » Släpp knappen så fort du har fokuserat siffrorna och tills att siffrorna slutat blinka
- » Kalibrering till rumstemperatur är färdig och termometern är klar för temperaturmätning